

# Acessorios Sonifier de Branson™



## Bocina de caudal continuo

### Generalidades

Diseñada para la investigación farmacéutica, la bocina de caudal continuo cuenta con dos entradas u orificios en el punto nodal no vibratorio. Una sustancia premezclada se introduce a través de una de las entradas mientras la bocina se activa ultrasónicamente. Al haber dos entradas disponibles, se pueden tratar simultáneamente dos tipos diferentes de materiales. La solución procesada sale por la punta de la bocina. La bocina se puede utilizar como un dispositivo de caudal continuo para recolectar la solución en un recipiente grande.

### Aplicaciones típicas

- Mezclado
- Emulsificación
- Disipación
- Formación de brumas y nieblas

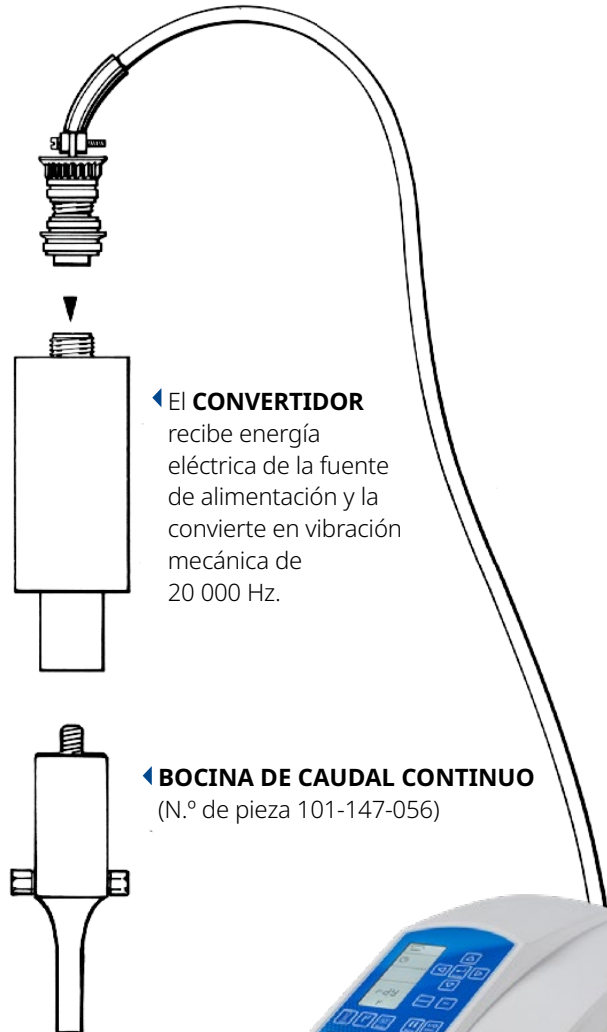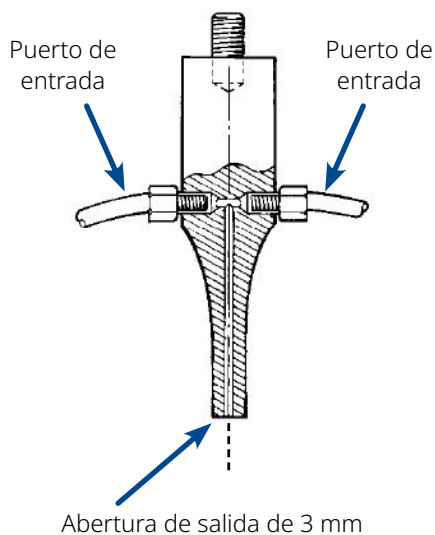

La **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** convierte la tensión de línea estándar de 60 Hz en energía eléctrica de alta frecuencia de 20 000 Hz.

La bocina de caudal continuo es compatible con SFX250 y SFX550.



Modelo mostrado: SFX550