

Accessoires Sonifier Branson™



Sonotrode d'écoulement

Vue d'ensemble

Conçues pour la recherche dans le domaine pharmaceutique, la sonotrode d'écoulement est dotée de deux entrées ou orifices au niveau du point nodal sans vibration de la sonotrode. Une substance pré-mélangée est acheminée via l'une des entrées, alors que la sonotrode est activée par ultrasons. Deux entrées étant disponibles, deux types de matériaux peuvent être traités simultanément. La solution traitée ressort au niveau de la pointe de la sonotrode. La sonotrode peut servir de dispositif à débit continu pour collecter la solution au sein d'un grand récipient.

Applications typiques

- Mélange
- Émulsification
- Dispersion
- Formation de brume et de brouillard

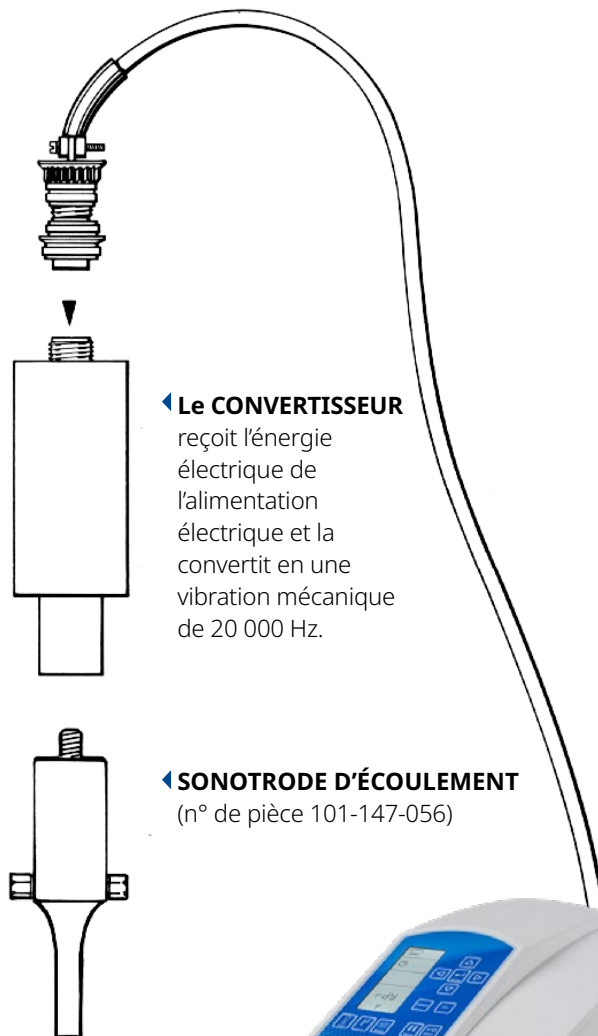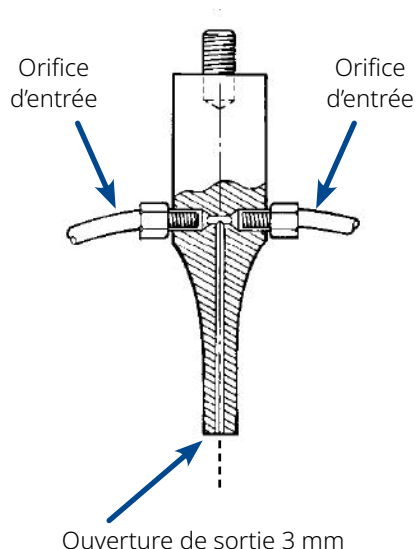

L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE convertit la tension de ligne standard de 60 Hz en une puissance électrique haute fréquence de 20 000 Hz.

Sonotrode d'écoulement compatible avec les modèles SFX250 et SFX550.



Modèle SFX550 présenté

BRANSON™

Pour plus d'informations :
www.Emerson.com/Branson

Le logo Emerson est une marque déposée et une marque de service d'Emerson Electric Co. Les logos de la marque sont des marques enregistrées d'un des groupes d'entreprises Emerson. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2025 Emerson Electric Co. Tous droits réservés.


EMERSON™