

必能信™ Sonifier® 超声波破碎仪配件



通孔探头

概述

该通孔探头在其非振动节点设有两个输入口或孔口，专为制药和研究应用而设计。当探头超声波激活后，预混物质可从其中一个输入口注入。两个输入口的设计允许同时处理两种不同类型的材料。处理后的溶液从探头尖端流出。探头也可在大型容器中用作收集溶液的连续流量设备。

典型应用

- 混合
- 乳化
- 分散
- 雾化

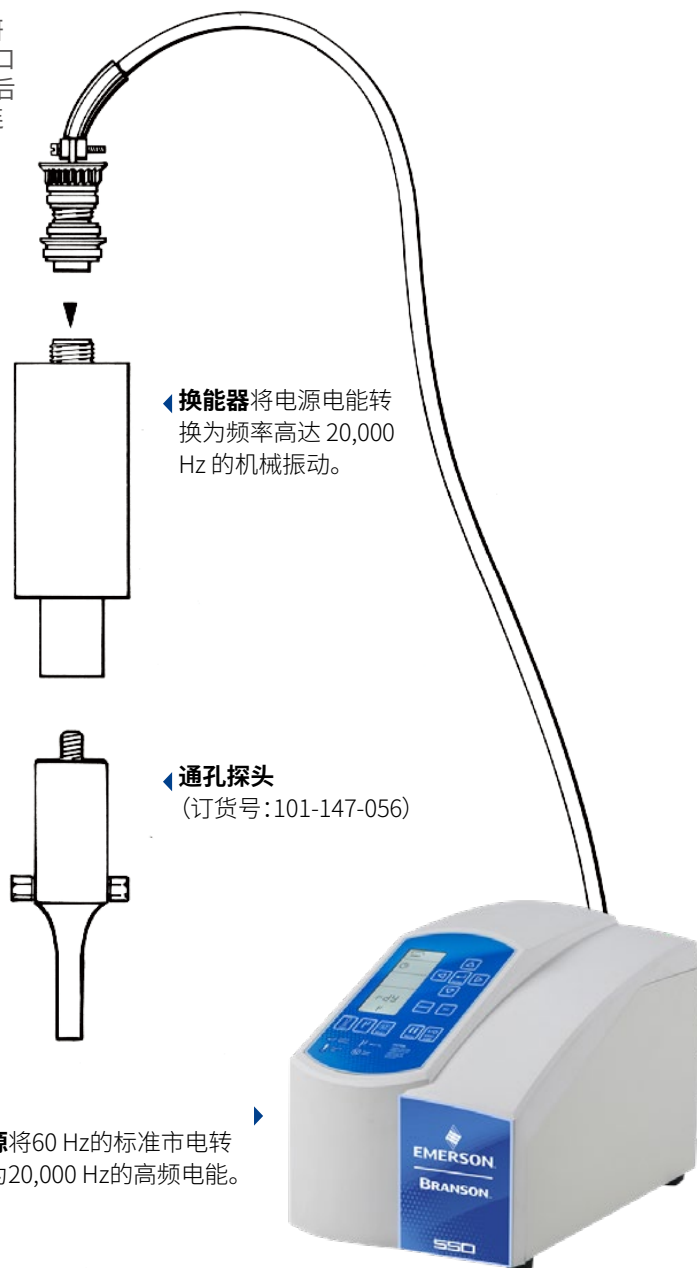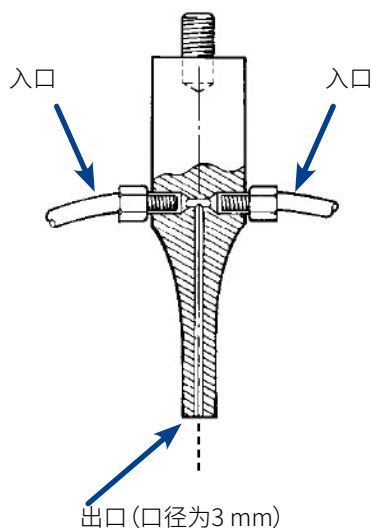

通孔探头兼容 SFX250 和 SFX550 型号。

图示为 SFX550 型号

BRANSON™

如需更多信息, 请访问:
www.Emerson.com/Branson

艾默生标识是 Emerson Electric Co. 的商标和服务标志。该品牌标志是艾默生集团旗下子公司之一的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。© 2025 Emerson Electric Co. 保留所有权利。


EMERSON™